



Microbiologie

MYCOFAST® REVOLUTION 2

Diagnostic des mycoplasmes urogénitaux

MÉTHODE DIRECTE



LA PRÉCISION DANS LE DIAGNOSTIC DES MYCOPLASMES UROGÉNITAUX

Détection, numération, identification et test de résistance aux antibiotiques

- ◆ Diagnostic complet avec un produit tout-en-un
- ◆ Compatible avec les milieux de transport Amies liquide
- ◆ Gestion des co-infections optimisée
- ◆ Antibiotiques en accord avec les recommandations internationales
- ◆ Seuils pathologiques adaptés pour chaque type d'échantillon
- ◆ Résultats rapides
- ◆ Lecture visuelle (colorimétrie)

MYCOFAST® REVOLUTION 2



▶ AVANTAGES

◆ Diagnostic complet en 24h*

- ◆ Détection, numération
- ◆ Identification
- ◆ Test de résistance aux antibiotiques

◆ Performances

Sensibilité

- ◆ Détection et numération de *U. urealyticum* à 10^3 , 10^4 et $\geq 10^5$ CCU/mL
- ◆ Détection et numération de *M. hominis* à 10^4 CCU/mL
- ◆ Seuils pathologiques testés pour chaque type d'échantillon

◆ Spécificité

- ◆ Milieux de croissance sélectifs pour chaque espèce testée séparément

Fiabilité

- ◆ 5 antibiotiques testés (LVX/MXF/ERY/CLI/TET) en accord avec les recommandations du CLSI (Clinical & Laboratory Standards Institute)
- ◆ Doxycycline présente dans le panel

Résultats rapides

- ◆ Activateur de croissance intégré pour *M. hominis*


◆ Facilité d'utilisation

- ◆ Réactifs prêts à l'emploi
- ◆ Puits préremplis avec le milieu de croissance
- ◆ Lecture visuelle colorimétrique
- ◆ Pas d'instrument requis

◆ Flexibilité et sécurité

- ◆ Milieu de transport optimisé : échantillons préservés jusqu'à 72h avant analyse
- ◆ Système de fermeture clipsable pour les galeries

▶ MÉTHODOLOGIE

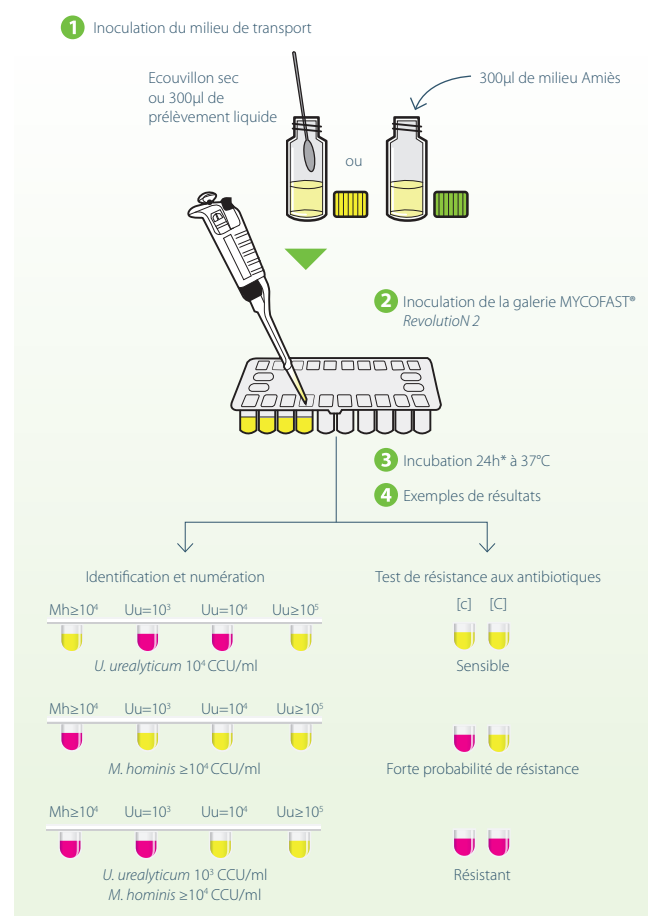

* Lecture de tous les échantillons à 24h.
Poursuivre l'incubation jusqu'à 48h uniquement pour les prélèvements liquides ou Amies négatifs en 24h.

▶ GAMMES DE PRODUITS

RÉF.	DÉSIGNATION	CDT.	UTILISATION
00080	MYCOFAST® Revolution N 2	25 tests	Kit complet
00081	MYCOFAST® Revolution N 2 AMIES	25 tests	Kit complet
00061	UMMt RevolutionN (optionnel)	50 flacons	Milieux de transport et d'inoculation
00083	UMMt AMIES RevolutionN (optionnel)	50 flacons	Milieux de transport et d'inoculation (pour échantillons Amies)
00082	COMPLEMENT MYCOFAST® Revolution N 2 (optionnel)	25 tests	Galeries pour diagnostic complémentaire
00064	MYCOPLASMA Stabilizer (optionnel)	100 tests	Supplément pour conservation des échantillons >56h
00900	MYCOPLASMA Control (optionnel)	12 tests	Souches cont rôles U.u. et M.h.

00080_00081_Flyer_MYC/Direct_FR_2020-08



NOUS CONTACTER

ELITech Microbio
19 allée d'Athènes
83870 Signes - France
Tél. : +33 4 83 36 10 82
Fax : +33 4 83 36 10 81



: ELITech Microbio (France)



ELITechGroup

EMPOWERING IVD

www.elitechgroup.com
elitechfrance@elitechgroup.com

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur les étiquettes ou dans les notices d'utilisation des produits