



Microbiologie

MYCOFAST REVOLUTION **ATB+**

Mycoplasmes urogénitaux

MÉTHODE DIRECTE



ÉLARGISSEZ LE CHAMP DES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES!

Détection, énumération, identification et test de sensibilité.

- ◆ Panel étendu d'antibiotiques conformes aux recommandations mondiales
- ◆ Diagnostic complet dans un produit tout-en-un
- ◆ Seuil pathologique adapté pour chaque type d'échantillon
- ◆ Résultats en 24 h pour les écouvillons
- ◆ Lecture visuelle et colorimétrique

► AVANTAGES

◆ Diagnostic complet en 24 h*

- ◆ Détection, énumération
- ◆ Identification
- ◆ Test de sensibilité aux antimicrobiens

◆ Performances de pointe

Sensibilité

- ◆ Détection et dénombrement de *U. urealyticum* à 10^3 et $\geq 10^4$ CCU/mL
- ◆ Détection et dénombrement de *M. hominis* à $\geq 10^4$ CCU/mL
- ◆ Seuil pathologique correct testé pour chaque type d'échantillon

Spécificité

- ◆ Identification confirmée par la vérification de la résistance naturelle d'U.u./M.h aux antibiotiques (clindamycine et érythromycine)

Fiabilité

- ◆ 6 antibiotiques (TEL/LVX/MXF/E/CM/TE) testés conformément aux directives du CLSI (Clinical & Laboratory Standards Institute)
- ◆ 5 autres antibiotiques testés (MIN/OFX/ROX/PRI/JOS)

Résultats rapides

- ◆ Activateur de croissance intégré pour *M. hominis*


◆ Facilité d'utilisation

- ◆ Réactifs prêts à l'emploi
- ◆ Chaque puits prérempli de milieu de culture
- ◆ Lecture colorimétrique visuelle
- ◆ Aucun instrument requis

◆ Flexibilité et sécurité

- ◆ Milieu de transport optimisé : échantillons conservés jusqu'à 72 heures avant l'analyse
- ◆ Système de fermeture à clip pour la galerie

► MÉTHODOLOGIE

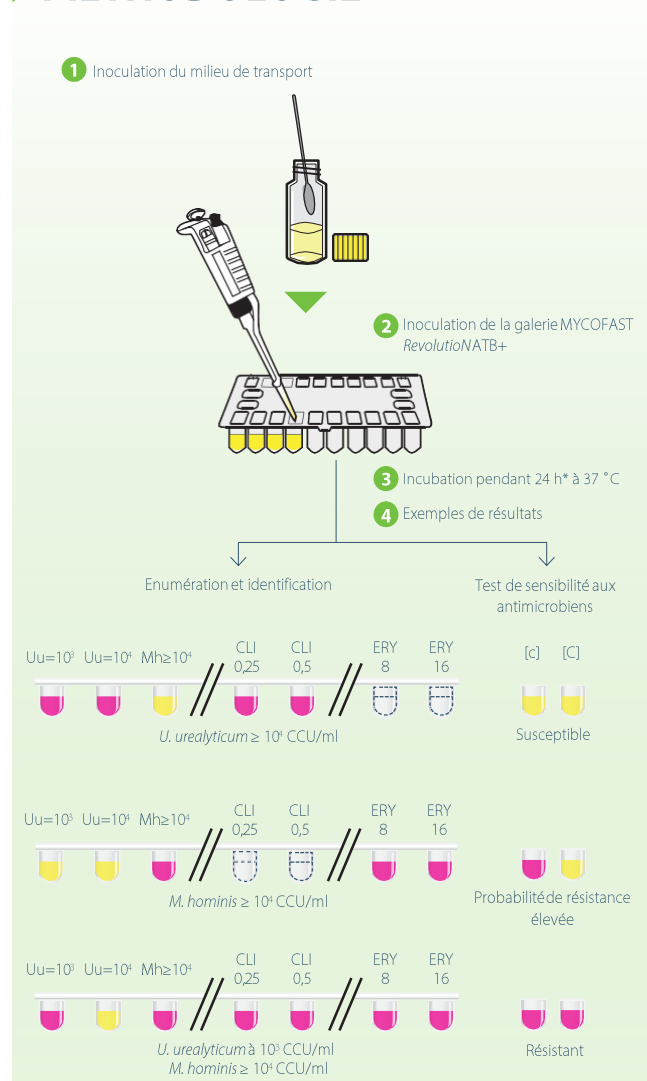

* Lecture des échantillons par écouvillons en 24 heures seulement.
Seuls les échantillons liquides présentant des résultats négatifs en 24 h sont analysés après 48 heures.

► GAMME DE PRODUITS

RÉF.	NOM	QTÉ	UTILISATION
00070	MYCOFAST Revolution ATB+	25 tests	Kit complet
00061	UMMt Revolution (en option)	50 flacons	Milieu de transport supplémentaire
00073	COMPLEMENT MYCOFAST Revolution ATB+ (en option)	25 tests	Galerie de test supplémentaires
00064	MYCOPLASMA STABILIZER (en option)	100 tests	Additif pour la conservation des échantillons >56 heures
00900	MYCOPLASMA CONTROL (en option)	12 tests	Souches de contrôle U.u. et M.h.



NOUS CONTACTER

ELITech Microbio

19 allée d'Athènes
83870 Signes
France

Tél. : +33 4 83 36 10 82
www.elitechgroup.com
em-marketing@elitechgroup.com



: ELITech Microbio (France)

Produit(s) destiné(s) aux professionnels de santé. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur les étiquettes ou dans les notices d'utilisation des produits.



ELITechGroup
A BRUKER COMPANY