



Microbiologie

MYCOFAST REVOLUTION ATB+

Mycoplasmes urogénitaux
MÉTHODE SCREENING



ÉLARGISSEZ LE CHAMP DES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES!

Détection, énumération, identification et test de sensibilité.

- ◆ Panel étendu d'antibiotiques conformes aux recommandations mondiales
- ◆ Diagnostic complet selon une approche en deux phases
- ◆ Seuil pathologique adapté pour chaque type d'échantillon
- ◆ Résultats en 24 h pour les écouvillons
- ◆ Lecture visuelle et colorimétrique

► AVANTAGES

◆ Diagnostic complet

ÉTAPE 1 (galerie MYCOFAST Screening RevolutionN)

- ◆ Détection en 24 h* d'*U. urealyticum* (U.u.) et de *M. hominis* (M.h.)

ÉTAPE 2 (galerie COMPLEMENT MYCOFAST RevolutionN ATB+) - 24 h* :

- ◆ Enumération, identification
- ◆ Test de sensibilité aux antimicrobiens

◆ Performances de pointe

Sensibilité

- ◆ Détection et quantification de *U. urealyticum* à 10^3 et $\geq 10^4$ CCU/mL
- ◆ Détection et quantification de *M. hominis* à $\geq 10^4$ CCU/mL
- ◆ Seuil pathologique correct testé pour chaque type d'échantillon

Spécificité

◆ MYCOFAST Screening RevolutionN :

Milieux de culture spécifiques pour M.h. et U.u. : résultats plus fiables, réduction du nombre de résultats erronés

◆ COMPLEMENT MYCOFAST RevolutionN ATB+ :

Identification confirmée par la vérification de la résistance naturelle d'U.u./M.h. aux antibiotiques (clindamycine et érythromycine)

Fiabilité

- ◆ 6 antibiotiques (TEL/LVX/MXF/E/CM/TE) testés conformément aux directives du CLSI (Clinical & Laboratory Standards Institute)
- ◆ 5 autres antibiotiques testés (MIN/OFX/ROX/PRI/JOS)

Résultats rapides

- ◆ Activateur de croissance intégré pour *M. hominis*


◆ Facilité d'utilisation

- ◆ Réactifs prêts à l'emploi
- ◆ Chaque puits est prérempli de milieu de culture
- ◆ Lecture colorimétrique visuelle
- ◆ Aucun instrument requis

◆ Flexibilité et sécurité

- ◆ Milieu de transport optimisé : échantillons conservés jusqu'à 72 heures avant l'analyse
- ◆ Système de fermeture à clip pour la galerie COMPLEMENT MYCOFAST RevolutionN ATB+

► MÉTHODOLOGIE

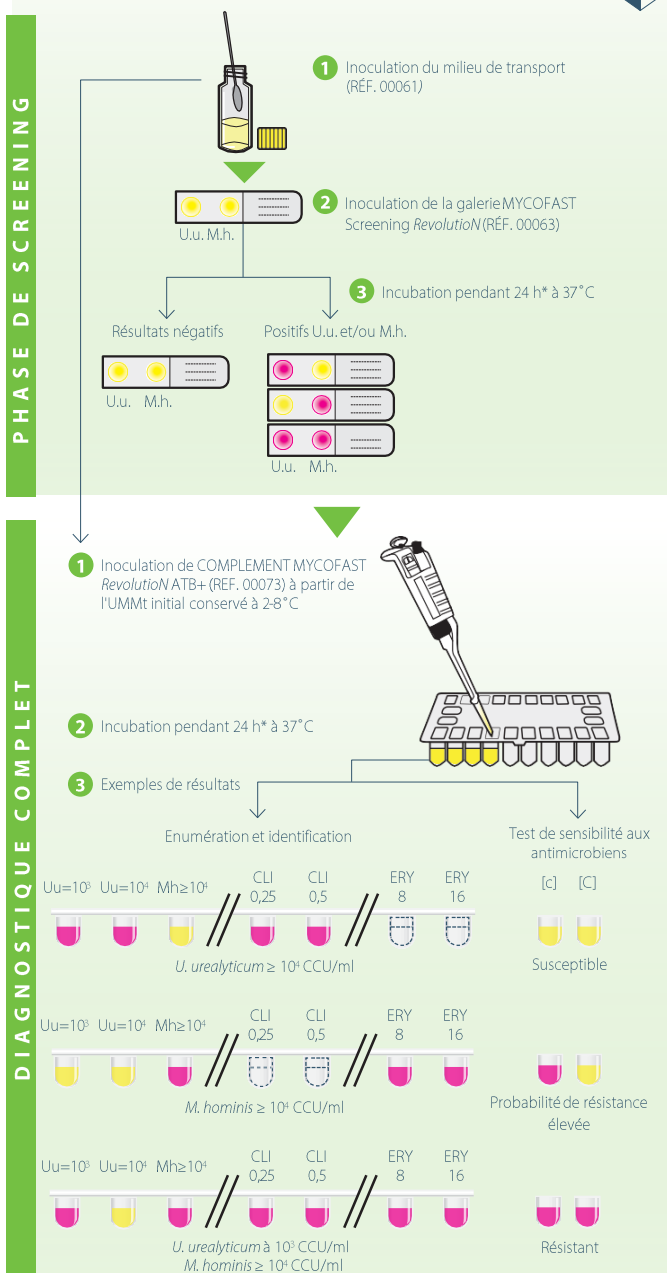

► GAMME DE PRODUITS

RÉF.	NOM	QTÉ	UTILISATION
00061	UMMt RevolutionN	50 flacons	Milieu de transport supplémentaire
00063	MYCOFAST Screening RevolutionN	50 tests	Galerie de screening pour la détection de U.u. / M.h.
00073	COMPLEMENT MYCOFAST RevolutionN ATB+	25 tests	Galerie complète pour un diagnostic approfondi
00064	MYCOPLASMA STABILIZER (en option)	100 tests	Additif pour la conservation des échantillons >56 heures
00900	MYCOPLASMA CONTROL (en option)	12 tests	Souches de référence U.u. et M.h.



NOUS CONTACTER

ELITech Microbio

19 allée d'Athènes
83870 Signes
France

Tél. : +33 4 83 36 10 82
www.elitechgroup.com
em-marketing@elitechgroup.com



: ELITech Microbio (France)

Produit(s) destiné(s) aux professionnels de santé. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur les étiquettes ou dans les notices d'utilisation des produits.



ELITechGroup
A BRUKER COMPANY